

Protector Ocular

Producto de Enfermería – Línea pediátrica

INDICACIONES

Protector Ocular con Sujeción Trasera es un producto sanitario que se emplea como protector ocular pediátrico, indicado en fototerapia.

Fácilmente adaptable gracias a su sistema tipo velcro.



COMPOSICIÓN

Producto con material tricapa, interior de algodón, exterior de poliamida y con relleno de espuma de poliuretano.

MODO DE EMPLEO

- Colocar el Protector alrededor de los ojos del paciente y sujetar el Protector mediante el sistema velcro.
- Pasar la cinta de sujeción por encima de la cabeza y sujetar el Protector mediante el sistema velcro. Cortar la cinta sobrante, si es preciso.

CARACTERÍSTICAS

El producto es ajustable mediante el sistema velcro, la tira de goma elástica y el material de la capa exterior. El producto es transpirable, no irrita, antialérgico. El sistema de fijación velcro permite una sujeción efectiva y eficaz.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.


ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Para escoger correctamente la talla se debe tener en cuenta el perímetro craneal y la superficie ocular a proteger:

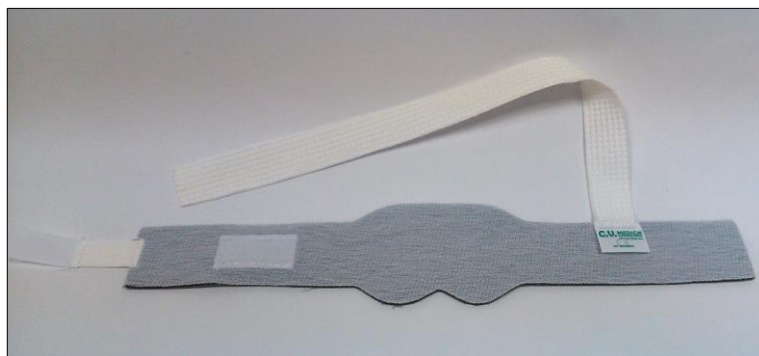

REFERENCIA	MODELO	PERÍMETRO CRANEAL	SUPERFICIE OCULAR	TIRA SUPERIOR
1029050	EXTRAPEQUEÑO	25 – 30 cm	4 * 8 (cm)	25 cm
1029100	PEQUEÑO	30 – 35 cm	5 * 8 (cm)	29 cm
1029150	MEDIANO	32 – 37 cm	6 * 9 (cm)	35 cm

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
1029050	25 uds/caja	20*15*15	0.4
1029100	25 uds/caja	20*15*15	0.4
1029150	25 uds/caja	20*15*15	0.42

Código de barras (EAN14, caja):

Referencia: 1029050	18427835105196
Referencia: 1029100	18427835101884
Referencia: 1029150	18427835101891

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.