

# Immobilisateur Épaule Gris

## INDICATIONS


L'**Immobilisateur Épaule Gris** est un dispositif médical utilisé pour le soutien et l'immobilisation du bras/épaule affecté par des blessures ou des fractures.

## COMPOSITION

Produit fabriqué avec un matériau à trois couches en polyamide et polyuréthane, avec des anneaux en polypropylène. Sangle de maintien des doigts en polyester.



## MODE D'EMPLOI

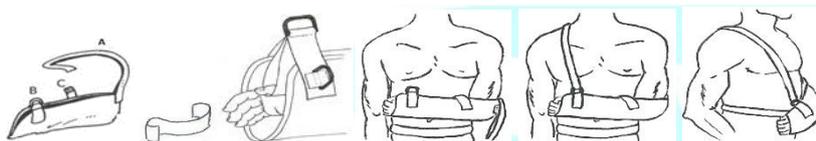

- Déplier l'immobilisateur en dépliant les sangles.
- Placer le bras dans l'immobilisateur. Soutenir le pouce et ajuster la sangle B.
- Le bras du patient doit reposer sur ce dernier en angle droit.
- Passer la sangle de fixation A au-dessus du bras et ajuster la dimension à l'aide de l'anneau B.
- Passer l'autre sangle de fixation autour du thorax pour immobiliser le bras.

## CARACTÉRISTIQUES

Produit conçu pour une application et un réglage faciles.  
Il dispose d'un système velcro pour la fermeture et le réglage.  
Soutient l'avant-bras et le poignet. Comprend une sangle de soutien pour le pouce.

Il est doté d'une courroie verticale réglable avec des crochets, dont la fonction est de distribuer le poids du bras sur le dos et l'épaule pour un plus grand confort. La sangle thoracique limite le mouvement de l'épaule.

## AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.  
Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.  
Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

## STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.  
Expiration : 5 ans.

### DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

Pour déterminer la taille à choisir, mesurer la longueur de l'avant-bras, du coude aux jointures.



RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	L. Bande (cm)	H. Bande (cm)
1000720	XL	49	19	Thorax : 140 Cou : 110	5
1000721	L	46	17	Thorax : 140 Cou : 110	5
1000722	M	42	16	Thorax : 140 Cou : 110	5
1000723	S	31	14	Thorax : 75 Cou : 75	5
1000724	XS	26	11	Thorax : 75 Cou : 75	5

PRESENTATION			
REFERENCE	UNITES BOITE	DIMENSIONS BOITE (cm)	POIDS BOITE* (kg)
1000720	10 unités/boîte	31*21*23	1.14
1000721	10 unités/boîte	31*21*23	0.97
1000722	10 unités/boîte	31*21*23	0.77
1000723	10 unités/boîte	30*22*15	0.7
1000724	10 unités/boîte	30*22*15	0.7

\* TOLÉRANCES : Poids  $\pm$  0.2 Kg

### CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

